

HURTIG GLØDETABS MÅLING QUICK IGNITION LOSS PROGRAM

PRODUKTIONS FORDELE

- Hurtig tilbagemelding til produktionen på glødetab-sindholdet i produktet
- Reduktion af VPO
- Optimering og reducere af binderforbrug
- Minimering af produktionsspild

KVALITETSFORDELE

- Brugervenligt interface mindsker muligheden for fejl.
- Opfølgning på kvaliteten i % af norm glødetab
- Registrering af relevante produktparametre
- Åbent dataformat


Data gemmes i MS Access så der er mulighed for nem integration til andre systemer



FRA DRIFTLABORATORIE

HVORDAN

- QIL programmet styrer og opsamler data igennem en interaktiv og sekventiel forbindelse til en Mettler vægt f.eks XP5003S sammenbygget med en stander i en høj temperatur ovn.
- Måling af glødetabet i ovnen hentes af QIL-programmet og vises løbende og målingen færdigmeldes når der ud fra foruddefinerede værdier er opnået en stabil vægt.
- Når målingen er afsluttet kan den gemmes i MS Access sammen med foruddefinerede produktionsrelevante parametre
- Stor tidsbesparelsen idet prøven ikke skal afkøle før vejning

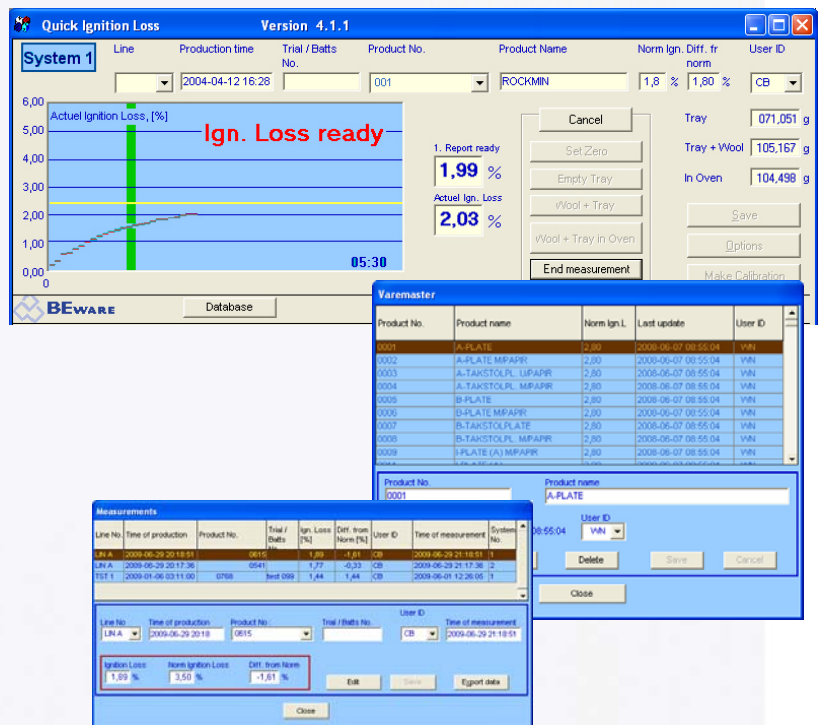

BEWARE OG DATAOPSAMLING

Vi har udviklet kundespecifikke programmer til dataopsamling fra måleinstrumenter og kommunikation og styring af apparater i 20 år. Se vore referencer på www.beware.dk.

Vi har en unik erfaring på netop dette område, så har I ikke en Mettler vægt men en anden type eller et andet apparat i ønsker at få data opsamlet fra, så kontakt os og lad os tale sammen om, hvordan vi kan løse jeres opgave.